

トータルHIPサポーター 「履く」という新戦略

「依存」から「自立支援」へ。

臨床エビデンスに基づく医療と日常をつなぐ包括的アプローチ

目次 (Agenda)

01

コンセプトと解決策

◎ ターゲット：全対象者（共通課題）

目的：痛みと廃用症候群の「負の連鎖」を断ち切る。

効果：「巻く（依存）」から「履く（自立支援）」へのパラダイムシフトにより、活動性を維持する。

02

ターゲット別・提供価値

👥 ターゲット：術後・産後・シニア

目的：各層の生活スタイルに合わせた課題解決。

効果：既存デバイス（包帯・ベルト）の不快感・ズレを解消し、**継続的なリハビリと疼痛緩和**を実現する。

03

臨床エビデンス

📄 ターゲット：医療従事者・導入検討者

目的：科学的根拠に基づく導入の意思決定。

効果：WISH型装具研究等のデータにより、**筋力回復・術後腫脹抑制・除痛効果**を実証する。

04

導入・運用ガイド

📖 ターゲット：実際の利用者・看護師

目的：安全かつ効果的な運用の定着。

効果：正しいサイズ選定と着用法（カテーテル対応等）を理解し、離脱を防ぎ効果を最大化する。

製品の目的と特徴

選択的圧迫の実現

目的：股関節・骨盤および術後創部の「選択的圧迫」です。
包帯では難しい鼠径部・股関節への圧迫に特化しています。

幅広い適応

THA術後：主なターゲット

その他術後：人工骨頭、転子部骨折

★全周性の圧迫構造のため、

手術のアプローチ（前方/後方など）を問いません。

- ・高齢者のためのリハビリサポーターとして
- ・骨盤帯痛への着圧サポーターとして

《男女兼用》トータルHipサポーターが
患者様のHip(股関節)、全面的にお助けします！

おたすけのポイント 1

腫れ軽減サポート

ウエストから患部にかけて編地を変えた3段階(強・中・弱)の圧力を設定。
術後の患部に強めの圧力を加えることで圧迫し、さらに股関節を動きやすくしリハビリをサポートします。

おたすけのポイント 2

カテーテル用開口部付き

股の位置に尿道カテーテル用の開口部があるので、リハビリの邪魔にもなりません。

■サイズ表

男女兼用	サイズ	M	L	LL	3L	4L
	ウエスト	68〜78 cm	78〜88 cm	88〜100 cm	100〜112 cm	112〜124 cm

※男女兼用サイズですので、ウエストサイズをご参考の上お選びください。
※サイズに迷われる場合は1サイズ大きめのものをお選びください。

品質：ナイロン87%・ポリウレタン13%
中国製

よくあるご質問

Q1. 医療機器ではないのか？

A1 医療機器ではございません。

Q2. 冷やす方法とどちらが効果あるのか？

A2 冷やすことも効果的でございます。こちらは薄手のサポーターなので、サポーターの上から冷却材の併用も可能ですし、凍傷の恐れのない温度素材(PCM/バックなど)をサポーターと皮膚の間に入れることも可能です。

Q3. ドレーンを使う場合はどうなるのか？

A3 関節内ドレーンを留置している場合の使用は想定しておらず、ドレーン抜去後の使用をお勧めしております。

Q4. おむつの上から履けるのか？

A4 術後使用のおむつ等を含め、基本的には着用は可能ですが、厚みのある市販品等の場合、難しい場合がございます。その場合も翌朝おむつが取れてからの着用は可能です。

Q5. いつから使用して、いつまで着けるのか？

A5 尿カテーテルを通す穴を設けているため、手術直後に手術室で履かせられる設計になっております。少なくとも術後1週間程度は洗濯しながら利用することをお勧めしておりますが、患者様の判断にまかせても大丈夫です。動きやすい、歩きやすいという評価もあり、術後半年後も履き続けている方も多くおられます。



「おたすけのLAB」は、富山の靴下メーカー 助野株式会社 が脚/下半身のお悩みを「お助けしたい」気持ちから立ち上げた研究・開発チームです。

製造：助野株式会社 〒933-8527 富山県高岡市上伏間江1番地



靴下の助野について詳しくはこちらから

適応①：高齢者への着圧サポーター：フレイルと疼痛の悪循環

高齢者の自立を脅かすのは、痛みと活動低下の連鎖です。



痛み

疼痛による活動意欲の低下



活動低下

動かないことによる廃用症
候群



筋力低下

関節原性筋抑制(AMI)の発生



転倒リスク

骨折・寝たきりへの移行

従来の課題：

「固定・安静」だけでは、この連鎖は断ち切れない。「動いて治す」ための能動的なサポートが必要不可欠です。

着圧サポータのメカニズム： 痛みが引き起こす「筋へのブレーキ」を解除する



The Biological Brake

関節の痛みは、反射的に周囲の筋活動を抑制する「関節原性筋抑制 (AMI)」を引き起こします。



Release the Brake

サポーターが圧力を軽減し、痛みを緩和。AMIという「ブレーキ」が解除されます。



Function Restored

抑制されていた筋出力が発揮されやすくなり、本来のパフォーマンスが回復します。

サポーターで思い抱く懸念点

「外部サポートへの依存が、
廃用性筋萎縮を助長するの
ではないか？」

この直感的な懸念が、サポーターの積極的な活用をためらわせる最大の要因でした。

筋力回復とADL向上： サポーターで筋力は「低下」せず、むしろ「強化」される

⇄筋力の回復

WISH型装具の研究結果：

6ヶ月間の日常生活での使用により、低下していた患側の股関節外転筋力が健側と同レベルまで回復。

メカニズム

疼痛緩和により、逃避性歩行を抑制

正しい歩行パターンの誘導

結果：「日々の歩行」が「筋トレ」へ変換される

歩行機能の改善



「巻く」から「履く」へのパラダイムシフト

これまでの「巻く」ベルト

- 固定力はあるが、締め付けが強く不快
- 動くとズレる
- トイレの着脱が面倒で続かない

トータルHIPサポーター「履く」

- **選択的圧迫**：必要な場所をピンポイントでサポート
- **Daily Use**：衣服の下に着用可、トイレもそのまま
- **Medical**：尿カテーテル対応で術直後から使用可能

リハビリでの安全で効果的な使用戦略

✓推奨される使用法 (DOs)

- **Active Wear 戦略**：散歩やリハビリなど、活動時のみ装着する。パフォーマンスを高めリスクを回避。
- **運動療法との併用**：疼痛緩和と筋トレを組み合わせ、相乗効果を狙う。

✗避けるべき使用法 (DON'Ts)

- **サポーター単独使用**：あくまで包括的アプローチの一部。

適応②：THA術後腫脹予防のためのサポーター

前方アプローチのTHA術後の腫脹は整形外科共通の課題

既存の対策

- 弾性包帯：ずれやすい
- ドレーン：管理が煩雑
- 特に何もしない：腫れる



トータルHIPサポーター

おたすけのポイント 1

腫れ軽減サポート

ウエストから患部にかけて幅広を変えた3段階(強・中・弱)の圧力を設定。術後の患部に強めの圧力を加えることで圧迫し、さらに関節を動きやすくしリハビリをサポートします。

おたすけのポイント 2

カテーテル用開口部付き

股の位置に尿嚢カテーテル用の開口部があるので、リハビリの邪魔にもなりません。



解決策：トータルHIPサポーター

「巻く」から「履く」へのパラダイムシフト

「履く」UXで解消。適度な圧迫(3段階) × 快適性 × 利便性を実現。

 **選択的圧迫:** ピンポイントに圧迫。

 **Daily Use:** 衣服の下に目立たず着用。トイレ動作を妨げない。

 **Medical:** 尿カテーテル対応で術直後から使用可能。

おたすけのポイント 1

腫れ軽減サポート

ウエストから患部にかけて編地を変えた3段階(強・中・弱)の圧力を設定。術後の患部に強めの圧力を加えることで圧迫し、さらに股関節を動きやすくしリハビリをサポートします。

おたすけのポイント 2

カテーテル用開口部付き

股の位置に尿道カテーテル用の開口部があるので、リハビリの邪魔にもなりません。




エビデンス：DAA-THA術後の腫脹予防・除痛

研究デザイン：後ろ向き非無作為化研究 (n=63)。DAA-THA術後、手術室で装着し1週間継続。

THA術後の腫脹は
術後5日目をピークに腫れ
12週でもとにもどる

Fig 1. 大腿周径の変化(%) 全体的傾向

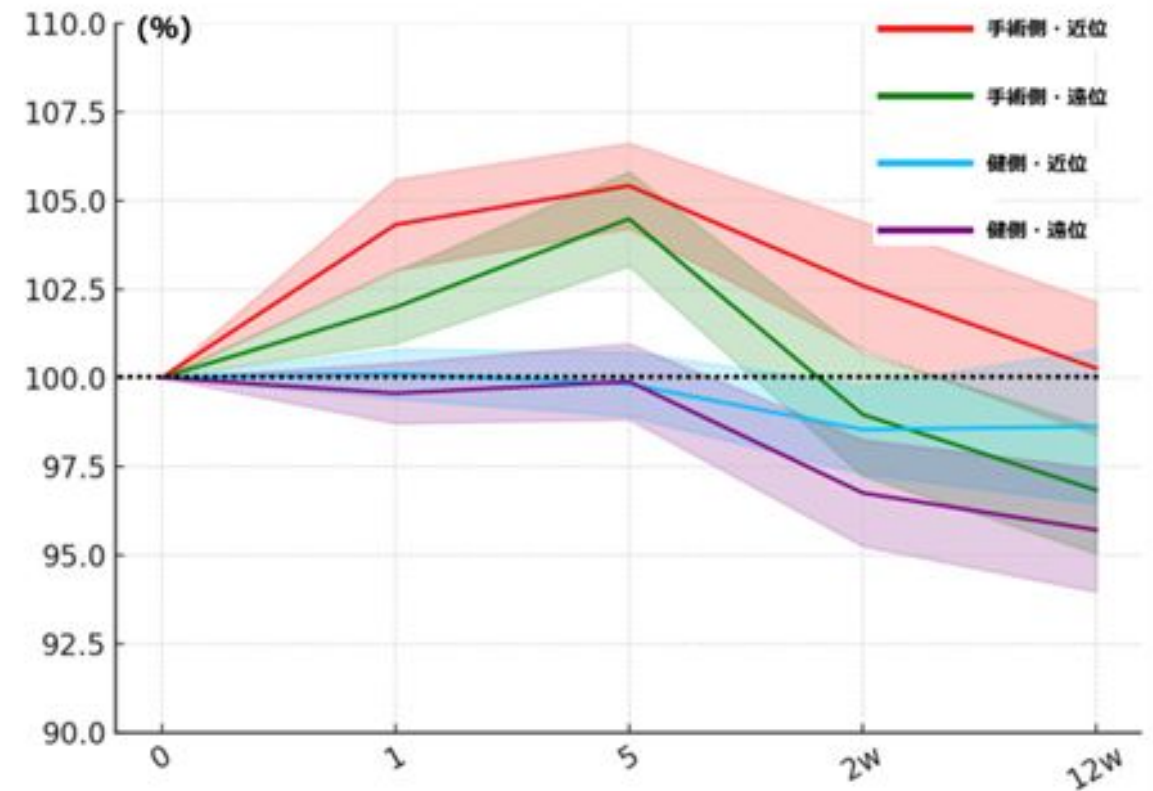

エビデンス：DAA-THA術後の腫脹予防・除痛

研究デザイン：後ろ向き非無作為化研究 (n=63)。DAA-THA術後、手術室で装着し1週間継続。

ピーク時の腫脹軽減


大腿周径の変化 (術後5日目)



※手術側大腿近位での比較。TFL筋膜下等の液体貯留を「選択的圧迫」で抑制。

急性期・回復期双方の除痛

疼痛NRS (0-10) の推移

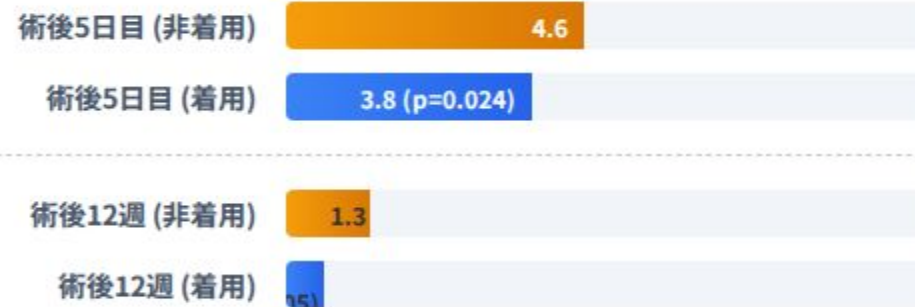


ユーザーの声：試着アンケート結果 (n=62)


高い受容性と機能実感



⚠課題：サイズ感

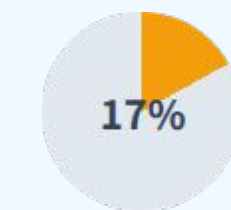

ウエスト「きつい」

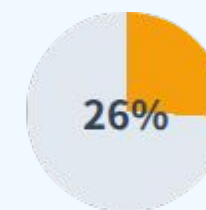


太もも「きつい」


ウエストと大腿近位のミスマッチにより「きつい」と感じる層が存在します。

適応③：産後骨盤帯痛(PGP)へのアプローチ

サポータは
仙腸関節・恥骨結合
両方に圧がかかる

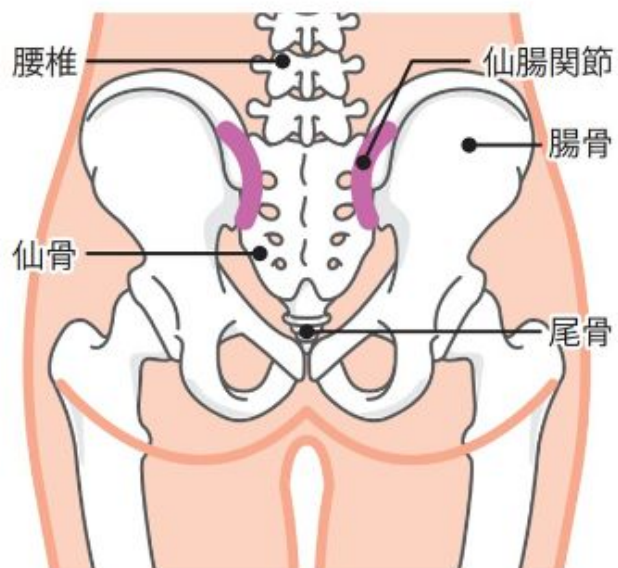

- ✓ **課題：** 産後女性の約25%が1年以上続く骨盤帯痛を経験。「力的安定性(Force Closure)」の低下が主因。
- ✓ **解決策：** 仙腸関節・恥骨結合へ適切な圧迫を加え、物理的に安定性を補助します。
- ✓ **メリット：** 「履く」タイプのため、トイレ動作や育児の邪魔にならず、高い継続率を実現します。

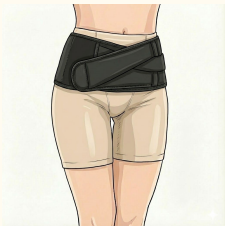ターゲット層	既存の対策	既存デバイスの課題・限界	トータルHIPサポーターの強み
股関節術後 (THA等)	弾性包帯 または「なし」	包帯はズレやすく、巻き直しが手間 圧もかかりづらい	術後腫脹・疼痛を有意に抑制 (エビデンス有) 尿カテーテル・ドレーン対応で術直後からOK 選択的圧迫で創部を保護しつつリハビリ促進
産後・一般女性 (骨盤帯痛)	骨盤ベルト 	トイレの度に外すのが面倒で続かない 座るとずり上がり、腹部を圧迫して不快 位置合わせが難しく、効果が安定しない	「履く」タイプのためトイレ動作フリー 育児や家事で動いてもズレない高い適合性 仙腸関節・恥骨結合を安定させ疼痛緩和
シニア (筋力維持・予防)	股関節サポーター 	「いかにも医療用」な外見は敬遠される 厚手で衣服の下から使用しにくい	衣服の下に目立たず着用可能 (外出に最適) 適度な圧迫感で「守られている」安心感 メッシュ素材で通気性が良く、継続しやすい リハビリ効果による身体機能の維持・向上
施設入所者 (転倒リスク)	ヒップ プロテクター	パッドが分厚く、着脱や排泄介助が大変 寝ている時に違和感・褥瘡リスクがある 「守る」だけで身体機能は向上しない	リハビリ効果による身体機能の維持・向上 薄手でオムツ交換やトイレ介助を妨げない AMI(筋抑制)を解除し、自立歩行を支援

導入・運用の実際 (FAQ)

📏 サイズ選びの鉄則

腹囲対応（M-4L）ですが、圧迫力が強いいため「**1～2サイズ上**」を推奨します。

特に腹囲100cm超の方でも4Lで十分な効果があります。

★使用頻度が高いのはLL, 3Lです。

👣 履き方のコツ（術後使用の場合）

T字帯の上から、または直履きも可。

術後は看護師介助で、カテーテルを穴に通して着用。慣れれば自身で着脱可能です。

🕒 着用タイミングと期間

術後：手術室で麻酔覚醒後に着用（防水被覆材と併用可）。術後24時間は連続使用、その後は間欠使用へ。

日常：活動時を中心に。夏場などは無理せず調整。

★術後使用の場合：写真のような防水被覆剤と相性が良いです



⚠️ 「キツイ」への対応

離脱率（約3%）を下げる鍵は、「**使用前の説明**」です。「治療のための圧迫・リハビリのための圧迫である」と事前に伝えることで、納得して継続いただけます。

②：運用上の疑問

ドレーンを使用する場合は？

関節内ドレーン留置中の使用は想定していません。

「ドレーン抜去後」の使用をお勧めします。

逆に通常のTHAならドレーン非使用での術直後の着用もできます

おむつの上から履けるか？

厚手の通常のおむつの上から履く設計にはなっていません。

通常の下着程度の厚さの上からの着用を想定したオーバーパンツです。

いつからいつまで使用？

開始：カテーテル穴があるため、手術室で直後から着用可。

期間：術後1週間程度は洗濯しながらの利用を推奨。その後は患者様の好みに任せます。長期利用者も多数おられます。

製品特性と効果について

医療機器ではないのか？

はい、医療機器ではありません。

効果・臨床実績は？

「動きやすい」「歩きやすい」「圧迫されて安心感がある」という評価が多いです。術後使用ではTHAでDAAでの実績が最多ですが、ALSや後方アプローチでも使用・検証されています。

痛みは軽減されるか？

医療機器ではないため、除痛効果は公には謳っておりません。
(※利用者の声として安心感等の報告はあります)

術後以外の使用は？


多くのユーザーが術後急性期を過ぎても自発的に継続して着用されています。
手術を受けていない方でも、着圧サポーターとして使用することができます。

患者様への提供方法



病院内売店

外来でサイズ説明し、院内の売店
経由で購入。（売店より卸へ発注
→次回外来や入院時まで納品）

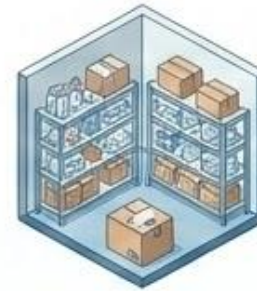

病院備品

病院が備品として一括購入し、
患者様へ有料また無料で提供する

★仲介となる医療機関様にも手数料が残る形を提案させていただきます



Conclusion



トータルHIPサポーターは、
術後・高齢者のリハビリツール・骨盤帯痛と様々な
用途に使用できます。

衣料から医療へ

エビデンス（腫脹抑制・筋力維持）とユーザーの声（快適性）が示す、
新しいスタンダードを共に作りましょう。